

thermoadvanced plus


minilandbaby.com

Medición en la frente · Forehead measurement · Medição de testa · Front mesure
Messen front · Misurazione del fronte · Pomiar na czole · Измерение на лбу


1



2

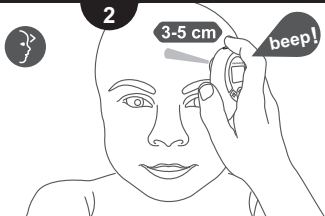

3

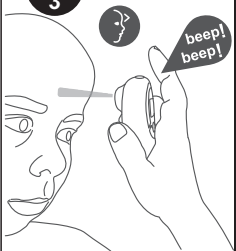

- Mantenga pulsado el botón de medida en la frente, la luz focal se encenderá de modo que pueda localizar la posición correcta para la medición en la frente.
- Press and hold the forehead button, the spotlight will come ON allowing you to locate the correct position for a forehead reading.
- Prima sem soltar o botão da testa, o foco está LIGADO, podendo localizar a posição correcta para a medição da temperatura na testa.
- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé : la lumière s'allume et vous pouvez ajuster la position pour une mesure correcte.
- Die Stirntaste drücken und gedrückt halten. Nun geht die Taschenlampe AN und Sie können nach der entsprechenden Position für eine Stirnmessung suchen.
- Premere e tenere premuto il pulsante fronte, il faretto è ON e in questo modo si può localizzare la posizione corretta per la misurazione alla fronte.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk czola, zapali się lampka, pomagając znaleźć właściwe miejsce do pomiaru.
- Нажмите и удерживайте кнопку измерения температуры тела на лбу. Загоревшийся фонарик поможет вам выбрать правильное положение для измерения.

4

Sano
Healthy
Saudável
En bonne santé
Gesund
Sano
Zdrowy
Здоровый



Fiebre
Fever
Febre
Fièvre
Fieber
Febbre
Gorączka
Лихорадка



5


Para una nueva medición esperar 30 segundos
For a new measurement wait 30 seconds
Para uma nova medição aguarde 30 segundos
Pour une nouvelle mesure attendez 30 secondes

Für eine neue Messung 30 Sekunden warten
Per una nuova misura attendere 30 secondi
W przypadku nowego pomiaru odczekać 30 sekund
Для нового измерения подождите 30 секунд

Medición de objetos · Objects measurement · Medição de objetos · Mesure des objets
 Objekte messung · Oggetti di misura · Mierzonych obiektów · Медиада де объёкты



Modo silencio · Mute function · Sem voz · Option silence
 Stillen Modus · non parlante · Bezgłośny · беззвучный режим

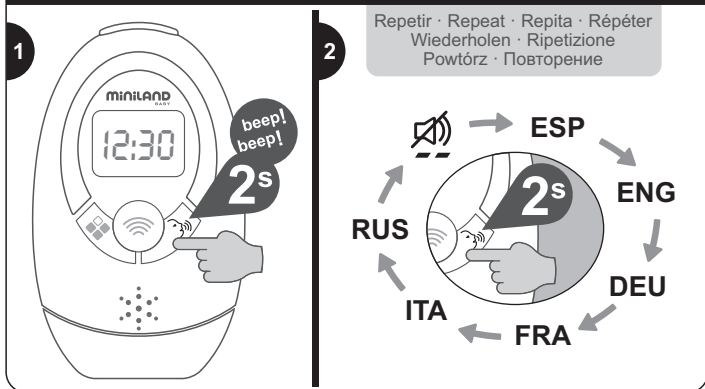

Para descargar la aplicación eMyBaby
 The eMyBaby app
 Para descarregar a aplicação eMyBaby
 Pour télécharger l'application eMyBaby
 Um die Anwendung eMyBaby runterzuladen
 Per scaricare l'applicazione eMyBaby
 W celu pobrania aplikacji eMyBaby
 Чтобы загрузить приложение eMyBaby



Visit our website on
www.eMyBaby.com

Android App on
 Google play

Download on the
 App Store